

Manual de instrucciones


Ref. ALC-001

El uso de nuestro alcoholímetro esta dirigido para dar una indicación de la posible presencia de alcohol en aire y sangre.

Cada persona tiene una reacción diferente al consumo del alcohol y los resultados son únicamente como referencia.

SPEED SOUND no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso de este producto. Este producto no debe usarse como herramienta determinante para saber si una persona está capacitada para conducir, o como una herramienta legal o de seguridad. La ingestión de cualquier tipo de alcohol le perjudicará en los reflejos y en el juicio para conducir vehículos de motor.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

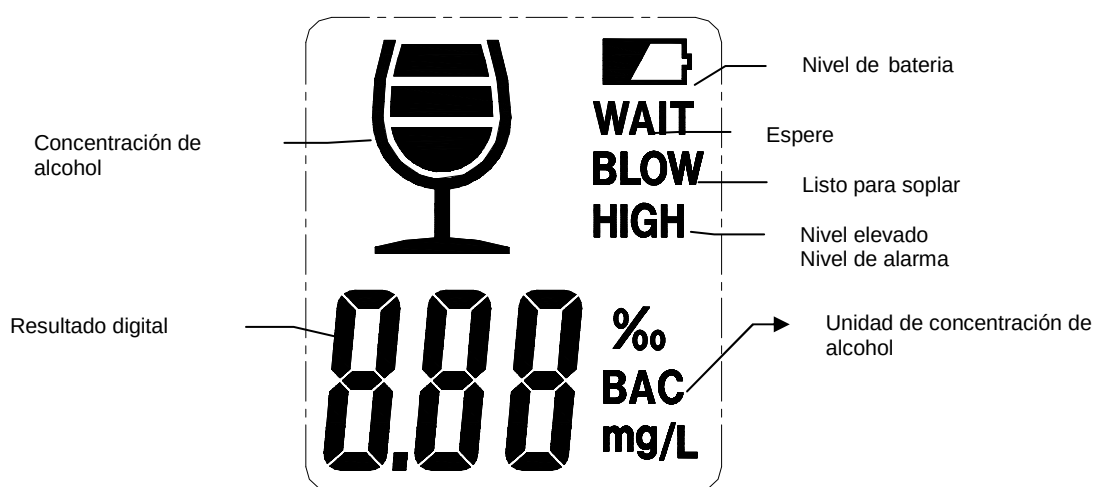

8.8 8	Concentración de alcohol en aire
10 sec / 18 sec count down	Preparandose
3 sec count down	Bateria baja
'C' shown in circle	Listo para soplar
'000' shown in flash	Volviendo a trabajar
FFF	Fallo del sensor

INSTRUCCIONES

1.- Abra la tapa de la batería en la parte trasera del producto para introducir las pilas 2xAAA y cierre la tapa

2.- Presione el botón de encendido/apagado durante 1 segundo, se encenderá la luz del display con un pequeño sonido, entonces se mostrará en la pantalla una cuenta atrás 10,9,8..., también aparecerá "WAIT" en la parte superior de la pantalla. El producto se pondrá en espera. Después de 10 seg., le mostrará en la pantalla "BLOW" y una "C", y podrá empezar el test.

3.- A continuación sople en la entrada despacio hasta que oiga un sonido. En la pantalla LCD verá "000" y enseguida le mostrará el resultado.

4.- El resultado permanecerá 8 seg en la pantalla.

Si necesita hacer un nuevo test, presione el botón de encendido/ apagado, entonces siga las instrucciones de nuevo.



Sobre 0,08%BAC



0,05%BAC-0,08%BAC



0,02%BAC-0,05%BAC



0%BAC-0,02%BAC

NOTIFICACIÓN

- 1.- Guarde el producto en su embalaje para evitar golpes .**
- 2.- No limpie el producto con ningún producto de limpieza, ya que podría dañar el funcionamiento del alcoholímetro.**
- 3.- Utilice las baterías suministradas.**
- 4.- Para un buen resultado, efectúe el test una vez pasados 10 minutos de la ingestión de la bebida.**
- 5.- Después de un largo tiempo sin ser utilizado, si el nivel de alcohol iniciado está en el display LCD como alto nivel, encienda y apague lo para estabilizar el nivel hasta que aparezca en pantalla nivel 0.00.**